



Test rapide NADAL® COVID-19 Ag

Test rapide pour la détection des antigènes nucléoprotéiques viraux du SARS-CoV-2 dans des échantillons humains nasopharyngés et oropharyngés

Importance des tests d'antigènes de la COVID-19

« Chaque catégorie de tests de diagnostic a son propre rôle unique à jouer dans la lutte contre ce virus ».

- U.S. Food and Drug Administration

Alors que le test rapide NADAL® COVID-19 IgG/IgM* détecte le virus de manière indirecte, le test rapide NADAL® COVID-19 Ag détecte le virus directement, en vérifiant la présence de protéines spécifiques au SARS-CoV-2. La détection des antigènes comble ainsi une lacune en matière de diagnostic. La protéine de la nucléocapside (N) est idéale pour cette détection, car elle est très présente dans le virus et est suffisamment spécifique pour le SARS-CoV-2. Elle fait partie de ses quatre protéines structurales majeures et est impliquée dans la réplication, la transcription et l'emballage du génome viral.


Test rapide NADAL® COVID-19 Ag

Le test rapide NADAL® COVID-19 Ag est un immunodosage chromatographique à flux latéral pour la détection qualitative des nucléoprotéines virales du SARS-CoV-2 dans des échantillons humains nasopharyngés et oropharyngés. Ce test est une aide au diagnostic des infections au SARS-CoV-2. Il est à noter que la concentration des antigènes nucléoprotéiques


viraux varie au cours de la maladie et peut tomber en-dessous du seuil de détection du test. Une éventuelle infectiosité des sujets testés ne peut être exclue sur la base de résultats de tests négatifs.

Vos avantages en un coup d'oeil :

- ✓ Haute spécificité
- ✓ Haute sensibilité pour une charge virale élevée
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Des résultats de tests rapides et fiables en seulement 15 minutes
- ✓ Peut être effectué avec des échantillons naso- ou oropharyngés
- ✓ Stockage à température ambiante
- ✓ Tous les composants de test – y compris les écouvillons stériles – sont inclus
- ✓ Pas de réactivité croisée avec les coronavirus pathogènes humains (tels que hCoV-229E, -HKU1, -NL63 ou -OC43) ou les virus de la grippe (tels que Influenza A/B)

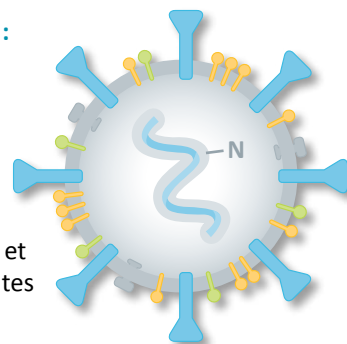

Exécution du test

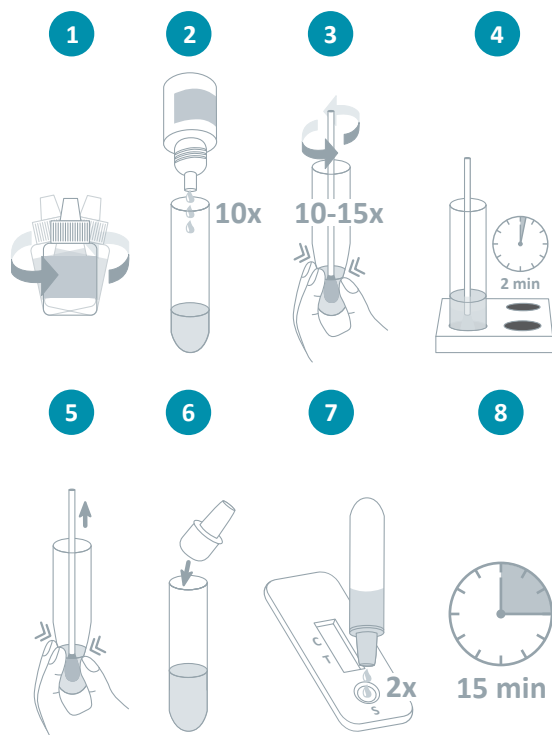


Description détaillée dans la notice d'utilisation.

Interprétation des résultats




Une lacune en matière de diagnostic est comblée – Fenêtre de détection similaire à la PCR

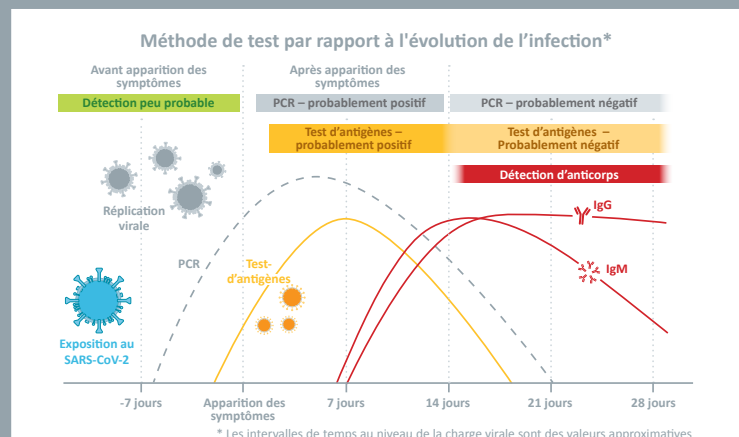

Sources : Sethuraman N, Jeremfah SS, Ryo A. Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA. 2020;323(22):2249-2251

Identification des patients avec une charge virale élevée – Sensibilité similaire à la PCR pour des valeurs de $C_t \leq 30$

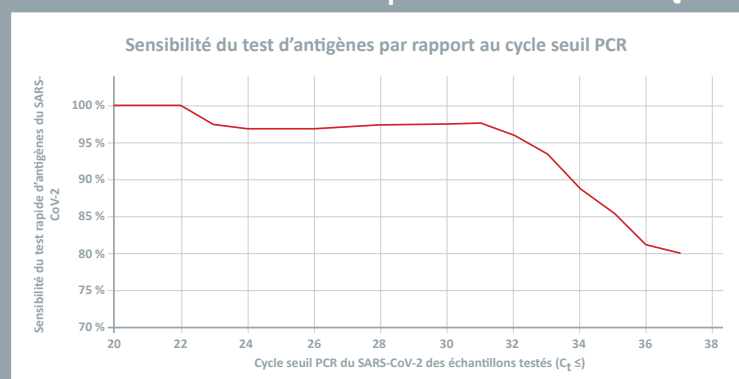

NADAL® COVID-19 Ag Cassette

Échantillons naso- et oropharyngés

Référence 356044

20 tests par boîte

Matériel fourni :

- Cassettes,
- Écouvillons stériles,
- Tubes d'extraction et bouchons compte-gouttes,
- Support pour tubes de réactif,
- Flacons de solution tampon,
- Notice d'utilisation.

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre service commercial :

Tel : 04 70 03 72 72 - Fax : 04 70 28 17 60 - Email : contact@mediccentre.com

Siège social : 15 rue Jules Verne - 63100 CLERMONT FERRAND

Etablissement : 25 rue Jean Moulin - 03410 DOMERAT